

# **KERN**

**KERN & Sohn GmbH**

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## **KERN** *eco* **Gebruiksaanwijzing** **Compacte weegschaal**

### **KERN FCB**

Type FCB\_A

Version 2.0

2017-07

NL



**FCB-BA-nl-1720**



# KERN FCB

Typ FCB\_A

Versie 2.0 2017-07

## Gebruiksaanwijzing Compacte weegschaal

---

---

### Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Technische gegevens</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Conformiteitverklaring</b> .....	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Aanzicht van het apparaat</b> .....	<b>7</b>
<b>3.1</b>	<b>Toetsenbordoverzicht</b> .....	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Fundamentele aanwijzingen (algemeen)</b> .....	<b>8</b>
<b>4.1</b>	<b>Reglementair gebruik</b> .....	<b>8</b>
<b>4.2</b>	<b>Ongeoorloofd gebruik</b> .....	<b>8</b>
<b>4.3</b>	<b>Waarborg</b> .....	<b>8</b>
<b>4.4</b>	<b>Toezicht op de testmiddelen</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Essentiële veiligheidsinstructies</b> .....	<b>9</b>
<b>5.1</b>	<b>Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht nemen</b> .....	<b>9</b>
<b>5.2</b>	<b>Scholing van het personeel</b> .....	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Transport en opslag</b> .....	<b>9</b>
<b>6.1</b>	<b>Controle bij overname</b> .....	<b>9</b>
<b>6.2</b>	<b>Verpakking</b> .....	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Uitpakken, installatie en inbedrijfstelling</b> .....	<b>9</b>
<b>7.1</b>	<b>Opstelplaats, inzetgebied</b> .....	<b>9</b>
<b>7.2</b>	<b>Uitpakken/installeren</b> .....	<b>10</b>
<b>7.3</b>	<b>Netaansluiting</b> .....	<b>10</b>
<b>7.4</b>	<b>Werking met batterijvoeding/accuvoeding (optioneel)</b> .....	<b>11</b>
<b>7.5</b>	<b>Aansluiting van randapparatuur</b> .....	<b>11</b>
<b>7.6</b>	<b>Eerste inbedrijfstelling</b> .....	<b>12</b>
<b>7.7</b>	<b>Justering</b> .....	<b>12</b>
<b>7.8</b>	<b>Justeren</b> .....	<b>12</b>

<b>8</b>	<b>Basiswerking</b>	<b>13</b>
	Inschakelen	13
	Uitschakelen	13
	Wegen	13
	Tarreren	13
	Functie PRE-TARE	14
	Plus/minus wegingen	15
	Hoeveelheden	15
	Wegingen "Netto totaal"	16
	Procentuele bepaling	17
<b>9</b>	<b>Menu</b>	<b>18</b>
9.1	Navigatie in het menu	18
9.2	Menuoverzicht	21
9.3	Beschrijving van individuele menupunten	23
	Weegeenheden	23
	Dosering en "Zero-tracking"	24
	Selectie Justeergewicht	24
	Filter	26
	Achtergrondverlichting van het display	27
	Functie Dier wegen	27
	Terugstellen op fabrieks-instelling	28
9.4	Interfaceparameter	29
	Modus "Gegevensoverdracht"	29
	Afdrukuitvoer	30
	Transmissiesnelheid	31
<b>10</b>	<b>Gegevensuitgang RS 232 C</b>	<b>31</b>
10.1	Technische gegevens	31
10.2	Pinbezetting van de uitgangsbuss van de weegschaal	31
10.3	Beschrijving van de gegevenstransfer	32
10.4	Uitvoer op barcodeprinter	34
<b>11</b>	<b>Onderhoud, instandhouding, afvalverwerking</b>	<b>34</b>
11.1	Reiniging	34
11.2	Onderhoud, instandhouding	34
11.3	Afvalverwerking	34
<b>12</b>	<b>Kleine hulp bij pannes</b>	<b>35</b>

## 1 Technische gegevens

KERN (Type)	FCB 3K-4A	FCB 6K-4A
Handelsmerk	FCB 3K0.1	FCB 6K0.5
Afreesbaarheid (d)	0.1 g	0.5 g
Weegbereik (max.)	3 kg	6 kg
Tarreebereik (subtractief)	3 kg	6 kg
Reproduceerbaarheid	0.1 g	0.5 g
Lineariteit	0.3 g	1.5 g
Minimaal gewicht per stuk bij telling van het aantal stuks	0.2 g	1 g
Opwarmtijd	2 uren	30 minuten
Referentieaantallen bij telling van het aantal stuks	5, 10, 20,25, 50	
Weegeenheden	Details „Weegeenheden“ zie hoofdstuk 9.3	
Aanbevolen justeergewicht, niet bijgedaan (klasse) Details over de „Keuze van het justeergewicht“ zie hoofdstuk 9.3	3 kg (M1)	6 kg (F2)
Overgangstijd (typisch)	3 sec.	
Bedrijfstemperatuur	+ 5° C ... + 35° C	
Luchtvochtigheid	max. 80 % (niet condenserend).	
Behuizing (b x d x h) mm	270 x 345 x 106	
Weegplaat mm	252 x 228	
Gewicht kg (netto)	3	

<b>KERN (Type)</b>	<b>FCB 8K-4A</b>	<b>FCB 10K3A</b>
Handelsmerk	FCB 8K0.1	FCB 12K1
Afreesbaarheid (d)	0.1 g	1 g
Weegbereik (max.)	8 kg	12 kg
Tarreebereik (substractief)	8 kg	12 kg
Reproduceerbaarheid	0.1 g	1 g
Lineariteit	0.3 g	3 g
Minimaal gewicht per stuk bij telling van het aantal stuks	0.2 g	2 g
Opwarmtijd	2 uren	30 minuten
Referentieaantallen bij telling van het aantal stuks	5, 10, 20, 25, 50	
Weegeenheden	Details „ <b>Weegeenheden</b> “ zie hoofdstuk 9.3	
Aanbevolen justeergewicht, niet bijgedaan (klasse) Details over de „ <b>Keuze van het justeergewicht</b> “ zie hoofdstuk 9.3	8 kg (F2)	12 kg ( M1)
Overgangstijd (typisch)	3 sec.	
Bedrijfstemperatuur	+ 5° C ... + 35° C	
Luchtvochtigheid	max. 80 % (niet condenserend).	
Behuizing (b x d x h) mm	270 x 345 x 106	
Weegplaat mm	252 x 228	
Gewicht kg (netto)	3	

<b>KERN (Type)</b>	<b>FCB 20K-3A</b>	<b>FCB 30K-3A</b>
Handelsmerk	FCB 24K2	FCB 30K1
Afreesbaarheid (d)	2 g	1 g
Weegbereik (max.)	24 kg	30 kg
Tarreebereik (substractief)	24 kg	30 kg
Reproduceerbaarheid	2 g	1 g
Lineariteit	6 g	3 g
Minimaal gewicht per stuk bij telling van het aantal stuks	4 g	2 g
Opwarmtijd	30 minuten	30 minuten
Referentieaantallen bij telling van het aantal stuks	5, 10, 20, 25, 50	
Weegeenheden	Details „ <b>Weegeenheden</b> “ zie hoofdstuk 9.3	
Aanbevolen justiegewicht, niet bijgedaan (klasse) Details over de „ <b>Keuze van het justiegewicht</b> “ zie hoofdstuk 9.3	20 kg ( M1)	30 kg ( M1)
Overgangstijd (typisch)	3 sec.	
Bedrijfstemperatuur	+ 5° C ... + 35° C	
Luchtvochtigheid	max. 80 % (niet condenserend).	
Behuizing (b x d x h) mm	270 x 345 x 106	
Weegplaat mm	252 x 228	
Gewicht kg (netto)	3	

## 2 Conformiteitverklaring

De huidige EG/EU conformiteitverklaring is beschikbaar op:






[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)

### 3 Aanzicht van het apparaat



Pos.	Naam
1	Weegschaalplateau
2	Afleesinrichting
3	Toetsenbord

#### 3.1 Toetsenbordoverzicht

Toets	Omschrijving	Functie
	Toets <b>PRINT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weeggegevens via interface overbrengen</li> <li>Menu oproepen (toets ingedrukt houden totdat UNIT verschijnt)</li> </ul>
	Toets <b>SET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instellingen in het menu bevestigen</li> <li>Opslaan en menu verlaten,</li> </ul>
	Toets <b>MODE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menupunten oproepen</li> <li>Instellingen in het menu wijzigen</li> <li>Justeren</li> </ul>
	Toets <b>TARE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tarreren</li> </ul>
	<b>ON/OFF</b> -toets	<ul style="list-style-type: none"> <li>In- / uitschakelen</li> </ul>

## **4 Fundamentele aanwijzingen (algemeen)**

### **4.1 Reglementair gebruik**

De door u aangekochte weegschaal dient om de weegwaarde van te wegen goed te bepalen. Z is voor het gebruik als "niet-automatische weegschaal" voorzien. Dit betekent dat het te wegen goed met de hand voorzichtig en in het midden van de weegplaat aangebracht wordt. Nadat er een stabiele weegwaarde bereikt werd, kan de weegwaarde afgelezen worden.

### **4.2 Ongeoorloofd gebruik**

Weegschaal niet voor dynamische wegen gebruiken. Indien er kleine hoeveelheden van het te wegen goed verwijderd of toegevoerd worden, kunnen er door de in de weegschaal aanwezige "stabiliteitscompensatie" foutieve weegresultaten aangegeven worden! (Voorbeeld: langzaam uitstromen van vloeistoffen uit een op de weegschaal gesitueerd reservoir). Geen permanente belasting op de weegplaat achterlaten. Deze kan het meetsysteem beschadigen. Schokken en overbelastingen van de weegschaal boven de aangegeven maximale belasting („Max.“), te verminderen met een eventueel reeds aanwezige tarralast, onvoorwaardelijk vermijden. Weegschaal zou hierdoor beschadigd kunnen worden.

Weegschaal nooit in explosieve ruimten bedienen. De standaarduitvoering niet explosievast. De weegschaal mag vanuit constructief oogpunt niet gewijzigd worden. Dit kan tot foutieve weegresultaten, veiligheidstechnische tekortkomingen en ook tot de vernieling van de weegschaal leiden. De weegschaal mag uitsluitend in overeenstemming met de beschreven, vooraf bepaalde gegevens gebruikt worden. Afwijkende gebruiksmogelijkheden /toepassingsgebieden dienen door de firma KERN schriftelijk goedgekeurd te worden.

### **4.3 Waarborg**

Garantie komt te vervallen bij

- Veronachtzaming van onze in de gebruiksaanwijzing vooraf bepaalde gegevens
- Gebruik buiten de beschreven toepassingen
- Wijzigen of openen van het apparaat
- Mechanische beschadiging en beschadiging door media, vloeistoffen
- Natuurlijke slijtage en afslijting
- Ondeskundig uitgevoerde installatie of elektrische installatie
- Overbelasting van het meetsysteem

### **4.4 Toezicht op de testmiddelen**

In het kader van de kwaliteitsborging moeten de meettechnische eigenschappen van de weegschaal en van een eventueel aanwezig testgewicht met regelmatige tussentijden gecontroleerd worden. De verantwoordelijke gebruiker dient hiervoor een geschikt interval en dient tevens de aard en de omvang van deze test te definiëren. Informatie met betrekking tot het toezicht op de testmiddelen van weegschalen evenals de hiervoor noodzakelijke testgewichten zijn op de Homepage van de firma KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)) beschikbaar. In haar geaccrediteerde DKD-kalibreerlaboratorium kunnen er bij de firma KERN snel en voordelig testgewichten en weegschalen gekalibreerd worden (herleiding tot de nationale norm).



## 5 Essentiële veiligheidsinstructies

### 5.1 Aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht nemen

Neem deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en inbedrijfstelling zorgvuldig door, ook indien u met weegschalen van de firma KERN reeds ervaring opgedaan hebt.

### 5.2 Scholing van het personeel

Het apparaat mag uitsluitend door geschoolde medewerkers bediend en onderhouden worden.

## 6 Transport en opslag

### 6.1 Controle bij overname

Gelieve de verpakking onmiddellijk bij ontvangst en ook het apparaat bij het uitpakken op eventueel zichtbare, uitwendige beschadigingen te controleren.

### 6.2 Verpakking

Bewaar alle onderdelen van de originele verpakking voor een eventueel noodzakelijk transport naar de fabrikant.

Voor het transport naar de fabrikant mag enkel de originele verpakking gebruikt worden.

Torn vóór de verzending alle aangesloten kabels en losse/beweegbare onderdelen los.

Breng eventueel voorziene transportbeveiligingen aan. Beveilig alle onderdelen, bijvoorbeeld weegplaat, voedingseenheid etc., tegen het wegglijden en tegen beschadiging.

## 7 Uitpakken, installatie en inbedrijfstelling

### 7.1 Opstelplaats, inzetgebied

De weegschalen zijn zodanig geconstrueerd, dat er in de gebruikelijke gebruiksomstandigheden betrouwbare weegresultaten behaald worden. Exact en snel werkt u indien u de juiste plaats van installatie voor uw weegschaal kiest.

***Naam daarom op de plaats van installatie het volgende in acht:***

- Weegschaal op een stabiel, recht oppervlak zetten;
- Extreme warmte alsook temperatuurschommelingen, bijvoorbeeld door installatie naast de verwarmingsinstallatie of vlakke zoninstraling, vermijden;
- Weegschaal tegen directe tocht door geopende vensters en deuren beschermen;
- Trillingen tijdens het wegen vermijden;
- Weegschaal tegen hoge luchtvochtigheid, dampen en stof beschermen;
- Stel het apparaat niet gedurende een langere periode aan aanzienlijke vochtigheid bloot. Een ongeoorloofde bedauwing (condensatie van luchtvochtigheid aan het apparaat) kan zich voordoen indien er een koud apparaat in een beduidend warmere omgeving gebracht wordt. Acclimatiseer in dit geval het van het stroomnet verbroken apparaat ca. 2 uur lang bij kamertemperatuur.
- Statische oplading van te wegen goed, weegreservoir vermijden.

Bij het opduiken van elektromagnetische velden (bijvoorbeeld door mobiele telefoontoestellen of zendontvangapparaten), bij statische opladingen en ook bij een onstabiele stroomvoorziening zijn er grote displayafwijkingen (foutieve weegresultaten) mogelijk. De plaats van opstelling moet dan gewijzigd of de storingsbron verholpen te worden.

## **7.2 Uitpakken/installeren**

De weegschaal voorzichtig uit de verpakking nemen, plastic hoes verwijderen en de weegschaal op de voorziene werkplaats installeren.

De weegschaal dient zodanig geïnstalleerd te worden, dat de weegplaat exact waterpas staat.

- Weegschaal op een horizontale vaste onderlaag zetten.
- Transportbeveiliging aan 4-punts opname verwijderen.
- Eventueel beschikbare beschermfolie op weegplaat aftrekken.
- Weegplaat opzetten.

## **Omvang van de levering/standaardtoebehoren**

- Weegschaal
- Weegplaat
- Transportbeveiliging
- Voedingsapparaat
- Arbeidsbeschermende
- Gebruiksaanwijzing

## **7.3 Netaansluiting**

De stroomvoorziening gebeurt door middel van het externe voedingsapparaat. De opgedrukte spanningswaarde moet met de lokale spanning overeenstemmen.

Maak enkel gebruik van originele voedingsapparaten van de firma KERN. Het gebruik van andere fabrikaten vereist de toestemming van de firma KERN.

#### 7.4 Werking met batterijvoeding/accuvoeding (optioneel)

Deksel van de batterijhouder aan de onderzijde van de weegschaal afnemen. 9 V-blokbatterij aansluiten.

Deksel van de batterijhouder terug aanbrengen.

Voor de werking met batterijvoeding beschikt de weegschaal over een automatische uitschakelfunctie, die in het menu (zie hoofdstuk 9) geactiveerd of gedeactiveerd kan worden.

- ⇒ In de weegmodus toets PRINT ingedrukt houden totdat [Unit] aangegeven wordt.
- ⇒ Toets MODE herhaaldelijk indrukken totdat „AF“ verschijnt.
- ⇒ Met toets SET bevestigen.
- ⇒ Met toets **MODE** kan er nu uit volgende instellingen een keuze gemaakt worden:

„**AF on**“: Om zuinig met de batterij om te gaan, schakelt de weegschaal 3 minuten na beëindigde weging automatisch uit.

„**AF off**“: Uitschakelfunctie gedeactiveerd.

- ⇒ Selectie met toets SET bevestigen. De weegschaal keert terug naar de weegmodus.

Als de batterijen verbruikt zijn, verschijnt er op het display „LO“. Toets „**ON/OFF**“ indrukken en onmiddellijk batterijen wisselen.

Indien de weegschaal langere tijd niet gebruikt wordt, batterijen uitnemen en afzonderlijk bewaren. Het uitlopen van batterijvloeistof zou de weegschaal kunnen beschadigen.

Indien er een optioneel verkrijgbare accu aanwezig is, dient deze in de batterijhouder door middel van een aparte steekverbinding aangesloten te worden. Nu moet ook de met de accu bijgeleverde stekkervoedingseenheid gebruikt worden.

#### 7.5 Aansluiting van randapparatuur

Voordat er randapparatuur (printer, PC) op het gegevensinterface aangesloten wordt, moet de weegschaal onvoorwaardelijk van het stroomnet verbroken te worden.

Gebruik met uw weegschaal uitsluitend accessoires en randapparatuur van de firma KERN. Deze zijn optimaal op uw weegschaal afgestemd.

## 7.6 Eerste inbedrijfstelling

Om bij elektronische weegschalen nauwkeurige weegresultaten te behalen, moet de weegschaal zijn bedrijfstemperatuur (zie „Opwarmtijd“ hoofdstuk 1) bereikt hebben. De weegschaal moet voor deze opwarmtijd op de stroomvoorziening (netaansluiting, accu of batterij) aangesloten zijn.

De nauwkeurigheid van de weegschaal is afhankelijk van de lokale valversnelling. Onvoorwaardelijk de aanwijzingen in het hoofdstuk „Justering“ in acht nemen.

## 7.7 Justering

Omdat de waarde van de g-versnelling niet op iedere plaats op aarde gelijk is, moet iedere weegschaal – in overeenstemming met het ten grondslag dienende fysieke weegprincipe – op de plaats van opstelling op de aldaar heersende g-versnelling afgestemd worden (enkel indien de weegschaal niet reeds in de fabriek op de plaats van opstelling gejusteerd werd). Dit justeerprocédé moet bij de eerste inbedrijfstelling, telkens na een wissel van de locatie en ook bij schommelingen van de omgevingstemperatuur doorgevoerd worden. Om tot nauwkeurige meetwaarden te komen, is het bovendien aanbevelenswaardig, ook in de weegmodus periodiek te justeren.

## 7.8 Justeren

De justering dient met het aanbevolen justeergewicht (zie hoofdstuk 1 "Technische gegevens") doorgevoerd te worden. De justering is echter ook met gewichten van andere nominale waarden (zie tabel 1) mogelijk, maar vanuit meettechnisch oogpunt niet optimaal.

### Werkwijze bij de justering:

Stabiele omgevingsomstandigheden in acht nemen. Een opwarmtijd (zie hoofdstuk 1) voor de stabilisatie is noodzakelijk.

- ⇒ Weegschaal met toets **ON/OFF** inschakelen.
- ⇒ Toets **MODE** indrukken en ingedrukt houden, op het display wordt even „**CAL**“ aangegeven. Vervolgens wordt op het display knipperend de exacte grootte van het geselecteerde (zie hoofdstuk 9.3) justeergewicht aangegeven.
- ⇒ Nu het justeergewicht in het midden van de weegplaat zetten.
- ⇒ Toets **SET** indrukken. Even later verschijnt „**CAL F**“, daarna volgt automatisch de achterwaartse sprong naar de weegmodus. Op het display verschijnt de waarde van het justeergewicht.

In geval van een justeerfout of een verkeerd justeergewicht verschijnt „**CAL E**“. Justering herhalen.

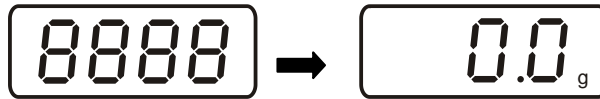
Justeergewicht in de nabijheid van de weegschaal bewaren. Dagelijkse controle van de weegnauwkeurigheid wordt bij toepassingen, waarbij de kwaliteit een rol speelt, aanbevolen.

## 8 Basiswerking

### Inschakelen




- ⇒ Toets **ON** indrukken.  
De weegschaal voert een zelftest door. Wanneer de gewichtsaanduiding verschijnt, is de weegschaal gereed om te wegen



### Uitschakelen



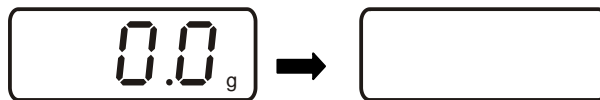- ⇒ Toets **OFF** indrukken, het display dooft



### Wegen

- ⇒ Te wegen goed opleggen
- ⇒ Stilstandcontrole afwachten, nadat de stilstand gecontroleerd werd, wordt rechts op het display de weegeenheid (bijvoorbeeld g of kg) aangegeven
- ⇒ Weegresultaat aflezen.

Indien het te wegen goed zwaarder dan het weegbereik is, verschijnt er op het display "**Error**" (=overbelasting) en ook een fluittoon.

### Tarreren

- ⇒ Leeg weegreservoir opleggen, het gewicht van het weegreservoir wordt aangegeven.



- ⇒ Toets **TARE** indrukken, de nulaanduiding verschijnt. Het tarragewicht blijft zolang opgeslagen totdat het gewist wordt.



- ⇒ Te wegen goed inwegen, het nettogewicht wordt aangegeven.



Het tarreerprocédé kan willekeurig vaak herhaald worden, bijvoorbeeld bij het afwegen van meerdere componenten bij een mengsel (bijwegen). De grens is bereikt wanneer het complete weegbereik bezet is.

Na het afnemen van het weegreservoir verschijnt het gewicht van het weegreservoir als minusaanduiding.

Het tarragewicht blijft zolang opgeslagen totdat het gewist wordt.

### Tarra wissen



- ⇒ Weegschaal ontlasten en toets **TARE** indrukken, de nulaanduiding verschijnt.



### Functie PRE-TARE



Met deze functie wordt het gewicht van een tarravat opgeslagen. Ook na het uit-/inschakelen werkt de weegschaal met de opgeslagen tarrawaarde verder.

- ⇒ In de weegmodus tarravat op de weegplaat zetten
- ⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „**PtArE**“ knipperend aangegeven wordt.
- ⇒ Met toets **SET** het actuele gewicht op de weegplaat als PRE-TARE waarde opslaan.

### PRE-TARE waarde wissen



- ⇒ Weegschaal ontlasten en toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „**PtArE**“ knipperend aangegeven wordt.
- ⇒ Met toets **SET** bevestigen. De PRE-TARE waarde wordt gewist, de nulaanduiding verschijnt.

## Plus/minus wegingen



Bijvoorbeeld ter controle van het gewicht per stuk, productiecontrole, enz.

- ⇒ Gewenst gewicht op de weegplaat zetten en met toets **TARE** tarreren.
- ⇒ Gewenst gewicht afnemen
- ⇒ Testitems achtereenvolgens op de weegplaat leggen, respectievelijke afwijking van het gewenste gewicht wordt correct volgens de voortekenen volgens „+“ en „-“ aangegeven.

Volgens dezelfde methode kunnen er ook verpakkingen met hetzelfde gewicht, gebaseerd op een gewenst gewicht, vervaardigd worden.

- ⇒ Terug naar de weegmodus door de toets **TARE** in te drukken.

## Hoeveelheden

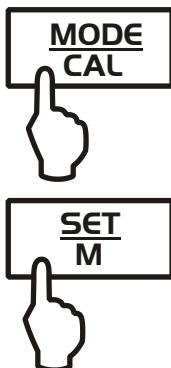
Bij de telling van het aantal stuks kunnen er ofwel stukken in een reservoir ingeteld of stukken uit een reservoir uitgeteld worden. Om een groter aantal stukken te kunnen tellen, moet met een kleine hoeveelheid (aantal referentiestukken) het gemiddelde gewicht per stuk opgespoord worden.

Hoe hoger het aantal referentiestukken, hoe hoger de telnaauwkeurigheid is. De referentie moet bij kleine of sterk verschillende stukken uiterst hoog gekozen te worden.

Hoe groter het aantal referentiestukken, hoe nauwkeuriger de telling van het aantal stuks.

Het verloop van de werkzaamheden wordt in vier stappen onderverdeeld:

- Weegreservoir tarreren
- Aantal referentiestukken vastleggen
- Referentiegewicht inwegen
- Stukken tellen



- ⇒ In de weegmodus toets **MODE** even indrukken. Referentieaantal „5<sup>PCS</sup>“ wordt knipperend weergegeven.
- ⇒ Door de toets **MODE** herhaaldelijk in te drukken, kunnen er nog andere referentieaantallen **10**, **25** en **50** opgeroepen worden. Zoveel te tellen exemplaren op de weegplaat leggen als het referentieaantal verlangt.
- ⇒ Met toets **SET** bevestigen. De weegschaal bevindt zich thans in de modus “Aantal stuks” en telt alle stukken, die zich op de weegplaat bevinden.

# i

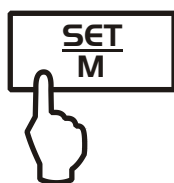
- **Terug naar de weegmodus**  
Toets **MODE** indrukken.
- **Foutmelding „Er 1“**  
Onder het minimale gewicht per stuk gebleven, zie hoofdstuk 1 „Technische gegevens“. Toets **MODE** indrukken en referentievorming herstarten.
- **Tarreren**  
Tarrareservoirs kunnen ook bij de telling van het aantal stuks gebruikt worden. Vóór het begin van de telling van het aantal stuks tarrareservoir met toets **TARE** weg tarreren.

## Wegingen “Netto totaal”

Nuttig als men een mengeling van meerdere componenten in een tarrareservoir inweegt en tot slot ter controle het totaalgewicht van alle ingewogen componenten nodig heeft (netto totaal, d.w.z. zonder het gewicht van het tarravat).


### Voorbeeld:

1. Tarrareservoir op de weegplaat zetten. Toets **TARE** indrukken, de nulaanduiding verschijnt.
  2. Component ❶ inwegen. Toets **TARE** indrukken, de nulaanduiding verschijnt. [▲] wordt aan de linkerrand van het display aangegeven.
  3. Component ❷ inwegen, toets **SET** indrukken. Netto - totaal (totaalgewicht van componenten ❶ en ❷) wordt aangegeven.
  4. Toets **SET** opnieuw indrukken, de nulaanduiding verschijnt.
  5. Component ❸ inwegen, toets **SET** indrukken. Netto - totaal (totaalgewicht van componenten ❶ en ❷ en ❸.) wordt aangegeven.
- ⇒ Receptuur eventueel tot aan de gewenste eindwaarde aanvullen. Voor iedere bijkomende component stap 4-5 herhalen.
- ⇒ Terug naar de weegmodus door de toets **TARE** in te drukken.





## Procentuele bepaling

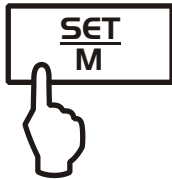

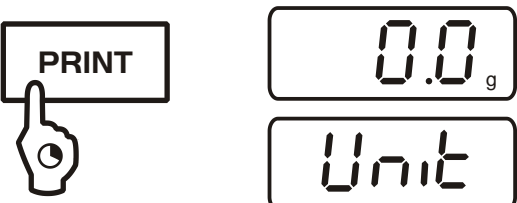
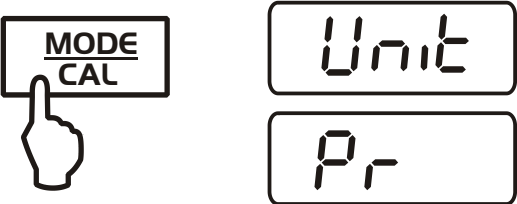

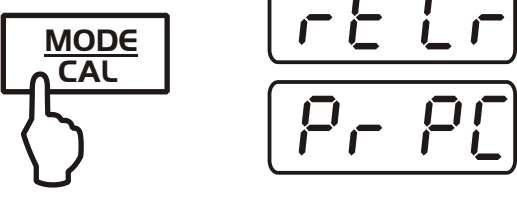

De procentuele bepaling maakt de gewichtsaanduiding in procent, gebaseerd op een referentiegewicht, dat met 100% overeenstemt, mogelijk.

- ⇒ In de weegmodus toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat [**100 %**] aangegeven wordt.
- ⇒ Referentiegewicht, dat met 100% overeenstemt, opleggen.
- ⇒ Met toets **SET** referentie opslaan. Referentiegewicht afnemen.
- ⇒ Te wegen goed opleggen.  
Het gewicht van het proefstuk wordt in procent, gebaseerd op het referentiegewicht, aangegeven.


Terug naar de weegmodus door de toets **MODE** in te drukken.

## 9 Menu
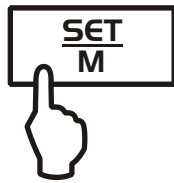
### 9.1 Navigatie in het menu

<p><b>Toegang tot het menu</b></p>  <p>The diagram shows a hand pressing the <b>PRINT</b> button. To the right, the display shows <b>0.0<sub>g</sub></b> on the top line and <b>Unit</b> on the bottom line.</p>	<p>In de weegmodus toets <b>PRINT</b> ingedrukt houden totdat <b>[Unit]</b> aangegeven wordt.</p>
<p><b>Menupunten oproepen</b></p>  <p>The diagram shows a hand pressing the <b>MODE CAL</b> button. To the right, the display shows <b>Unit</b> on the top line and <b>Pr</b> on the bottom line.</p>	<p>Met de toets <b>MODE</b> kunnen de individuele menupunten om beurten opgeroepen worden.</p>
<p><b>Instellingen wijzigen</b></p>  <p>The diagram shows a hand pressing the <b>SET M</b> button. To the right, the display shows <b>Pr</b>.</p>  <p>The diagram shows a hand pressing the <b>MODE CAL</b> button. To the right, the display shows <b>rE Cr</b> on the top line and <b>Pr PC</b> on the bottom line.</p>	<p>Opgeroepen menupunt met toets <b>SET</b> bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.</p> <p>Met de toets <b>MODE</b> kan de instelling gewijzigd worden. Telkens wanneer de toets <b>MODE</b> ingedrukt wordt, wordt de volgende instelling aangegeven, zie hoofdstuk 9.2 „Menuoverzicht“.</p>
<p><b>1. Wijziging van een menupunt opslaan en menu verlaten</b></p>  <p>The diagram shows a hand pressing the <b>SET M</b> button. To the right, the display shows <b>0.0<sub>g</sub></b>.</p>	<p>⇒ Toets <b>SET</b> indrukken, de weegschaal keert terug naar de weegmodus.</p>

## 2. Instelling van meerdere menupunten wijzigen



Pr

Opgeroepen menupunt met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.



rE Cr

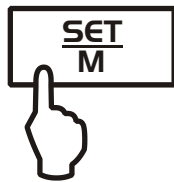
Met de toets **MODE** instelling wijzigen.

Pr PC



Exit

Toets **TARE** indrukken „Exit“ verschijnt.



StorE


### Ofwel

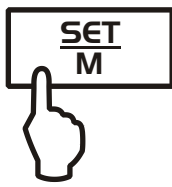Met toets **SET** (“Ja”) bevestigen, „**StorE**“ wordt aangegeven. Opslaan (toets **SET**) c.q. verwerpen (toets **PRINT**) en menu verlaten,

### of

toets **PRINT** (“Neen”) indrukken en wijzigingen aan nog andere menupunten zoals hierboven beschreven doorvoeren


## Opslaan/verwerpen en menu verlaten



Exit

Store

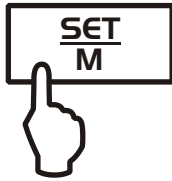⇒ Opslaan



0.0<sub>g</sub>

⇒ Verwerpen



0.0<sub>g</sub>

### Ofwel

Door het indrukken van de toets **SET** ("Ja") de doorgevoerde wijzigingen in het geheugen opslaan. De weegschaal keert automatisch terug naar de weegmodus.

### of

Om de wijzigingen te verwerpen toets **PRINT** ("Neen") indrukken. De weegschaal keert automatisch terug naar de weegmodus.

## 9.2 Menuoverzicht

Beschrijving van de werking	Functie	Parameters	Beschrijving van de keuzemogelijkheden
Omschakeling tussen weegeenheden (zie hfdst. 9.3)	<b>UNIT</b>	<b>g*</b>	Gram
		<b>kg</b>	Kilogram (afhankelijk van het model)
		<b>oz</b>	Ons
		<b>ozt</b>	Troy ons
		<b>lb</b>	Pound
		<b>tLh</b>	Tael Hongkong
		<b>tLt</b>	Tael Taiwan
		<b>gn</b>	"Grain" (afhankelijk van het model)
		<b>dwt</b>	Pennyweight (afhankelijk van model)
		<b>mo</b>	Momme
		<b>Tol</b>	Tola
		<b>ct</b>	Carat (afhankelijk van het model)
<b>FFA</b>	Vrij kiesbare factor		
Modus "Gegevenstransmissie" (zie hoofdstuk 9.4)	<b>PR</b>	<b>rE CR*</b>	Gegevensuitvoer via op afstand bestuurd commando's (zie hoofdstuk 10.3)
		<b>Pr PC</b>	Gegevensuitvoer door het indrukken van de toets PRINT (zie hoofdstuk 10.3)
		<b>AU PC</b>	Continue gegevensuitvoer (zie hoofdstuk 10.3)
		<b>bA Pr</b>	Uitvoer op barcodeprinter (zie hoofdstuk 10.4)
		<b>AU Pr</b>	Automatische Gegevensuitvoer van stabiele weegwaarden (zie hoofdstuk 10.3)
Afdrukuitvoer (zie hoofdstuk 9.4)	<b>LAPr</b>	<b>Hdr*</b>	Selectie van de kopregels
		<b>GrS</b>	Uitvoer van het totale gewicht
		<b>Net</b>	Uitvoer van het nettogewicht
		<b>tAr</b>	Uitvoer van het tarragewicht
		<b>N7E</b>	Uitvoer van het opgeslagen gewicht
		<b>PCS</b>	Uitvoer van het aantal stuks
		<b>AUJ</b>	Uitvoer van het gewicht per stuk
		<b>Rqt</b>	Uitvoer van het referentieaantal
		<b>FFd</b>	Uitgave van een bladaanvoer bij start afdrukuitvoer
<b>FFE</b>	Uitgave van een bladaanvoer bij einde afdrukuitvoer		

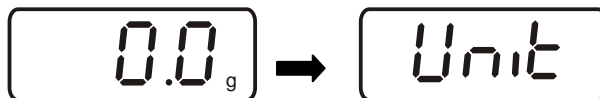
Transmissiesnelheid (zie hfdst. 9.4)	<b>bAUd</b>	<b>19200</b>	
		<b>9600*</b>	
		<b>4800</b>	
		<b>2400</b>	
		<b>1200</b>	
Auto off (batterijvoeding), zie hoofdstuk 7.4	<b>AF</b>	<b>on*</b>	Automatische uitschakelfunctie na 3 minuten zonder lastwijziging "Aan"
		<b>"off"</b>	Automatische uitschakelfunctie na 3 minuten zonder lastwijziging "Uit"
Auto Zero (zie hfdst. 9.3)	<b>tr</b>	<b>on*</b>	Aan
		<b>"off"</b>	Uit
Selectie justergewicht (zie hoofdstuk 9.3)	<b>CAL</b>	<b>100</b>	*van het model afhankelijk
		<b>200</b>	
		<b>300</b>	
Functie van de filter (zie hoofdstuk. 9.3)	<b>StAbiL</b>	<b>1</b>	1 Afleeseenheid
		<b>2</b>	Standaard aflezen
		<b>3</b>	Langzaam aflezen
Achtergrondverlichting van het display, (zie hoofdstuk 9.3)	<b>bL</b>	<b>on*</b>	Achtergrondverlichting ingeschakeld
		<b>"off"</b>	Achtergrondverlichting uitgeschakeld
		<b>CH</b>	Achtergrondverlichting wordt 10 seconden na het bereiken van een stabiele weegwaarde automatisch uitgeschakeld
Functie "Dier wegen" (zie hoofdstuk 9.3)	<b>ANL</b>	<b>off*</b>	Uit
		<b>3</b>	Tijdspanne 3 seconden
		<b>5</b>	Tijdspanne 5 seconden
		<b>10</b>	Tijdspanne 10 seconden
		<b>15</b>	Tijdspanne 15 seconden
Terug op fabrieksinstelling zetten (zie hoofdstuk 9.3)	<b>rSt</b>	<b>no*</b>	neen
		<b>yes</b>	ja

\* = Fabrieksinstelling

### 9.3 Beschrijving van individuele menupunten

#### Weegeenheden

- ⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.



- ⇒ Toets **SET** indrukken, de ingestelde eenheid wordt weergegeven.
- ⇒ Met de toets **MODE** kan er uit de verschillende eenheden (zie hierna volgende tabel) een keuze gemaakt worden.
- ⇒ Geselecteerde eenheid met toets **SET** bevestigen.

	Weergave	Omrekeningsfactor 1 g =
Gram	g	1.
Ons	oz	0.035273962
Troy Unze	ozt	0.032150747
Pound	lb	0.0022046226
Tael Hongkong	tlh	0.02671725
Tael Taiwan	tlt	0.0266666
Grain (afhankelijk van het model)	gn	15.43235835
Pennyweight (afhankelijk van het model)	dwt	0.643014931
Momme	mom	0.2667
Tola	tol	0.0857333381
Carat (afhankelijk van het model)	ct	5
Vrij kiesbare factor *)	FFA	xx.xx

#### \*) Invoer omrekeningsfactor

- ⇒ Zoals hierboven beschreven toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „**FFA**“ aangegeven wordt.
- ⇒ Voor de invoer van de factor toets **SET** indrukken, het actieve cijfer knippert.  
Met de **MODE**-toets wordt de aangegeven waarde met 1 verhoogd, met de **PRINT**-toets met 1 verlaagd.  
Met de toets **TARE** selectie van het cijfer naar links.
- ⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen.
- ⇒ Door de toets **SET** nogmaals in te drukken, wordt de „vrij kiesbare factor“ als actuele weegeenheid overgenomen.

## Dosering en "Zero-tracking"

Met de functie "Auto-Zero" ("Automatisch nul") worden kleine snelheidsschommelingen automatisch getarreed.

Indien er kleine hoeveelheden van het te wegen goed verwijderd of toegevoerd worden, kunnen er door de in de weegschaal aanwezige "stabiliteitscompensatie" foutieve weegresultaten aangegeven worden! (Voorbeeld: Langzaam uitstromen van vloeistoffen uit een op de weegschaal gesitueerd reservoir.)

Bij doseringen met kleine gewichtsschommelingen is het daarom aanbevelenswaardig, deze functie uit te schakelen.

Bij een uitgeschakelde **Zero-Tracking** wordt het display van de weegschaal echter onrustiger.

0.0<sub>g</sub>

⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.

Unit

⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „tr“ aangegeven wordt.

tr

⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.

⇒ Met toets **MODE** gewenste instellingen selecteren.

tr	"on"	Functie geactiveerd
tr	"off"	Functie gedeactiveerd

⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen.

## Selectie Justeergewicht

Bij de modelserie KERN FKB\_A kan het justeergewicht uit drie/vier vooropgestelde nominale waarden (ca.1/3; 2/3; max.) gekozen worden (zie hierna volgende tabel, fabrieksinstelling met grijze achtergrond). Om meettechnisch hoogwaardige meetresultaten te verlangen, is de selectie van een zo hoog mogelijke nominale waarde aanbevelenswaardig. Als optie kunnen de niet ingesloten justeergewichten bij de firma KERN verkregen worden.

0.0<sub>g</sub>

⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.

Unit

⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „CAL“ aangegeven wordt.

CAL

⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.

⇒ Met toets **MODE** gewenste instellingen selecteren.

⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen.

<b>FCB 3K0.1</b>	<b>FCB 6K0.5</b>	<b>FCB 8K0.1</b>
		2000

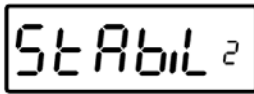
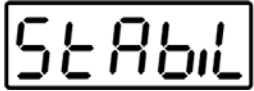


1000	2000	4000
2000	4000	6000
3000	6000	8000

<b>FCB 12K1</b>	<b>FCB 24K2</b>	<b>FCB 30K1</b>
4000	10000	10000
8000	15000	20000
12000	20000	30000

## Filter

enkel modell:  
FCB 8K-4A



(voorbeeld)

Door deze menupunt is het mogelijk om de weegschaal aan bepaalde omgevingsomstandigheden en metingsdoeleinden aan te passen.

⇒ In de weegmodus de toets **PRINT** drukken en zo lang gedrukt houden totdat de aanduiding “**Unit**” verschijnt.

⇒ De toets **MENU** meermaals drukken zodat de aanduiding “**StAbiL**” verschijnt.

⇒ Met de toets **SET** bevestigen, de actuele instelling verschijnt.

⇒ De gewenste instelling met de toets **MODE** kiezen.

<b>1</b>	Filter 1: De weegschaal reageert gevoelig en snel, een zeer rustige locatie.
<b>2</b>	Filter 2: De weegschaal reageert ongevoelig maar traag, onrustige locatie.
<b>3</b>	Filter 3: De weegschaal reageert ongevoelig maar traag, onrustige locatie.

⇒ De keuze met de toets **SET** bevestigen.

**Achtergrondverlichting van het display**



- ⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.
- ⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „**bl**“ aangegeven wordt.
- ⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.
- ⇒ Met toets **MODE** gewenste instellingen selecteren.

<b>bl</b>	“on”	Achtergrondverlichting ingeschakeld	Contrastrijk display, dat ook in het donker afgelezen kan worden.
<b>bl</b>	“off”	Achtergrondverlichting uitgeschakeld	Zuinige batterijmodus
<b>bl</b>	<b>Ch</b>	Achtergrondverlichting wordt 10 seconden na het bereiken van een stabiele weegwaarde automatisch uitgeschakeld	Zuinige batterijmodus

- ⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen.

**Functie Dier wegen**

Van de functie “Dier wegen” kan bij onrustige wegingen gebruik gemaakt worden. Gedurende een vastgelegde tijdspanne wordt de gemiddelde waarde van de weegresultaten gevormd. Hoe onrustiger het te wegen goed is, hoe langer de tijdspanne gekozen dient te worden.



- ⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.
- ⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „**ANL**“ aangegeven wordt.
- ⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.
- ⇒ Met toets **MODE** gewenste instellingen selecteren

<b>ANL</b>	<b>3</b>	Tijdspanne 3 seconden
<b>ANL</b>	<b>5</b>	Tijdspanne 5 seconden
<b>ANL</b>	<b>10</b>	Tijdspanne 10 seconden
<b>ANL</b>	<b>15</b>	Tijdspanne 15 seconden
<b>ANL</b>	<b>“off”</b>	Dierweging niet actief

- ⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen.
- ⇒ Te wegen goed (dier) op de weegplaat zetten en toets **SET** indrukken. Op het display loopt er een „countdown“. De gemiddelde waarde van de weegresultaten wordt aangegeven en blijft op het display staan.
- ⇒ Met de toets **SET** kan er tussen “Dier wegen” en “Normaal wegen” gewisseld worden.
- ⇒ Met de toets **SET** wordt de weegcyclus voor het wegen van een dier herstart.

### Terugstellen op fabrieksinstelling

Met deze functie worden alle weegschaalinstellingen terug op fabrieksinstellingen gezet.

0.0<sub>g</sub>

- ⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.

Unit

- ⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „rSt“ aangegeven wordt.

rSt

- ⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.
- ⇒ Met toets **MODE** gewenste instellingen selecteren

<b>rSt</b>	<b>yes</b>	Weegschaal wordt terug op fabrieksinstelling gezet
<b>rSt</b>	<b>no</b>	Weegschaal blijft in individuele instelling

- ⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen. De weegschaal keert terug naar de weegmodus.

## 9.4 Interfaceparameter

De gegevensuitvoer gebeurt door middel van interface RS 232 C.

### Algemeen

De vereiste voorwaarde voor de gegevensoverdracht tussen weegschaal en een randapparaat (bijvoorbeeld printer, PC ...) is dat beide apparaten op dezelfde interfaceparameters (bijvoorbeeld transmissiesnelheid, transmissiemodus...) ingesteld zijn.

### Modus

#### “Gegevensoverdracht”



⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.



⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „Pr“ aangegeven wordt.



⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.

⇒ Met toets **MODE** gewenste instellingen selecteren

<b>rE CR</b>	Gegevensuitvoer door middel van op afstand bestuurd commando's
<b>Pr PC</b>	Gegevensuitvoer door het indrukken van de toets <b>PRINT</b>
<b>AU PC</b>	Continue gegevensuitvoer
<b>bA Pr</b>	Uitvoer op barcodeprinter
<b>AU Pr</b>	Automatische Gegevensuitvoer van stabiele weegwaarden

⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen. De weegschaal keert terug naar de weegmodus.

## Afdrukuitvoer

Met deze functie wordt geselecteerd, welke gegevens door middel van het interface RS232C gezonden worden (geldt **niet** voor modus "Gegevenstransmissie" BAPr ).



⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.



⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „LAPr“ aangegeven wordt.



⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.

⇒ Met toets **MODE** gewenste uitvoerparameter selecteren

<b>Hdr*</b>	Selectie van de kopregels
<b>GrS</b>	Uitvoer van het totale gewicht
<b>Net</b>	Uitvoer van het nettogewicht
<b>tAr</b>	Uitvoer van het tarragewicht
<b>N7E</b>	Uitvoer van het opgeslagen gewicht
<b>PCS</b>	Uitvoer van het aantal stuks
<b>AUJ</b>	Uitvoer van het gewicht per stuk
<b>Rqt</b>	Uitvoer van het referentieaantal
<b>FFd</b>	Uitgave van een bladaanvoer bij start afdrukuitvoer
<b>FFE</b>	Uitgave van een bladaanvoer bij einde afdrukuitvoer

⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen, de actuele status ( on / off ) wordt aangegeven.

⇒ Met toets **MODE** en toets **PRINT** wordt de status gewijzigd „on ↔ off“.

⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen. De weegschaal keert terug naar de weegmodus.



Op deze manier kan de gebruiker zijn eigen gegevensblok configureren, dat dan naar een printer of PC gezonden wordt.

## Transmissiesnelheid

De transmissiesnelheid bepaalt de snelheid van de overdracht door middel van het interface, 1 baud = 1 bit/seconde.



- ⇒ In de weegmodus toets **PRINT** ingedrukt houden totdat **[Unit]** aangegeven wordt.
- ⇒ Toets **MODE** herhaaldelijk indrukken totdat „**bAUD**“ weergegeven wordt.
- ⇒ Met toets **SET** bevestigen, de actuele instelling wordt aangegeven.
- ⇒ Met de **MODE**-toets de gewenste instellingen kiezen  
9600 ⇒ 4800 ⇒ 2400 ⇒ 1200 ⇒ 19200
- ⇒ Selectie met toets **SET** bevestigen. De weegschaal keert terug naar de weegmodus.

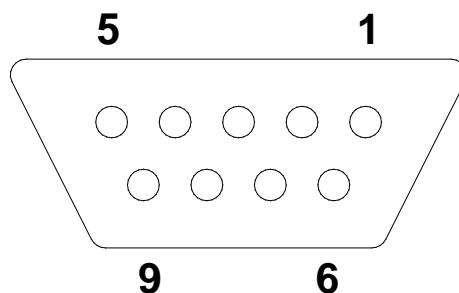
## 10 Gegevensuitgang RS 232 C

### 10.1 Technische gegevens

- 8-bit ASCII-code
- 1 startbit, 8 databits, 1 stopbit, geen pariteitbit
- Transmissiesnelheid kiesbaar op 1200, 2400, 4800 , **9600** en 19200 Baud
- Miniaturstekker noodzakelijk (9 polige D-Sub)
- Bij de werking met interface is een foutloze werking enkel met de corresponderende KERN-interfacekabel (max. 2m) gegarandeerd

### 10.2 Pinbezetting van de uitgangsbuss van de weegschaal

Frontaanzicht:



- Pin 2: Transmit data
- Pin 3: Receive data
- Pin 5: Signal ground

### 10.3 Beschrijving van de gegevenstransfer

#### Pr PC:

Toets **PRINT** indrukken, bij een stabiel gewicht wordt het formaat uit **LAPR** overgedragen.

- a. Formaat voor stabiele waarden voor gewicht/aantal stuks/procentuele weergave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B*	B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	g	B	B	CR	LF

- b. Formaat in geval van (een) fout(en)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	B	B	B	B	B	B	E	r	r	o	r	CR	LF

#### AU Pr:

Zodra de weegwaarde stabiel is, wordt het formaat uit **LAPR** automatisch overgedragen.

- c. Formaat voor stabiele waarden voor gewicht/aantal stuks/procentuele weergave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B*	B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	g	B	B	CR	LF

- d. Formaat in geval van (een) fout(en)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	B	B	B	B	B	B	E	r	r	o	r	CR	LF

#### AU PC:

Weegwaarden worden automatisch en continu gezonden en dit onafhankelijk het feit, of de waarde stabiel of onstabiel is.

- e. Formaat voor stabiele waarden voor gewicht/aantal stuks/procentuele weergave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B*	B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	g	B	B	CR	LF

- f. Formaat in geval van (een) fout(en)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	B	B	B	B	B	B	E	r	r	o	r	CR	LF

- g. Formaat voor onstabiele waarden voor gewicht/aantal stuks/procentuele weergave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B*	B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	CR	LF



## rE Cr:

Op afstand bestuurd commando's "s/w/t" worden door de afstandsbesturingseenheid naar de weegschaal als ASCII-code gezonden. Nadat de weegschaal de commando's "s/w/t" ontvangen heeft, zendt ze gegevens.

Daarbij dient in acht genomen te worden dat de volgende op afstand bestuurd commando's zonder daaropvolgende CR LF gezonden moeten worden.

- s**      Functie:      Stabiele weegwaarde voor het gewicht wordt door middel van het RS232-interface gezonden.
- w**      Functie:      Weegwaarde voor het gewicht (stabiel of onstabiel) wordt door middel van het RS232-interface gezonden.
- t**      Functie:      Er worden geen gegevens gezonden, de weegschaal voert de functie "Tarra" uit.

### h. Formaat voor stabiele waarden voor gewicht/aantal stuks/procentuele weergave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
B*	B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	g	B	B	CR	LF

### i. Formaat in geval van (een) fout(en)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	B	B	B	B	B	B	E	r	r	o	r	CR	LF

### j. Formaat voor onstabiele waarden voor gewicht/aantal stuks/procentuele weergave

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B*	B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	CR	LF

## Symbolen

B*	Spatie of M
B / 0 / .	Spatie / Waarden voor gewicht / Decimaalteken, afhankelijk van de weegwaarde
g	Gewichtseenheid / stuks / %
E, o, r	ASCII-code of "E, o, r"
CR	Symbool Woordoverbrenging (Carriage Return)
LF	Symbool Regelopschuiving (Line Feed)

## **10.4 Uitvoer op barcodeprinter**

De modus "Gegevensoverdracht" dient op „**BA Pr**“ gezet te worden (zie hoofdstuk 9.4).

Als barcodeprinter is het Zebra-printer model LP2824 voorzien.

Daarbij dient erop gelet te worden dat het uitvoerformaat van de weegschaal vast gedefinieerd is en niet gewijzigd kan worden.

Het afdrukformaat is in de printer opgeslagen. Dit betekent dat de printer in geval van een defect niet door een fabrieksnieuwe printer vervangen kan worden, maar van tevoren bij de firma KERN op de corresponderende software afgestemd moet worden.

De Zebra-printer en de weegschaal dienen in een uitgeschakelde toestand met de bijgeleverde interfacekabel verbonden te worden.

Nadat beide apparaten ingeschakeld werden en de gebruiksgereedheid bereikt werd, wordt er telkens bij het indrukken van de toets **PRINT** een etiket afgedrukt.

## **11 Onderhoud, instandhouding, afvalverwerking**

### **11.1 Reiniging**

Vóór de reiniging het apparaat van de bedrijfsspanning verbreken.

Geen agressieve reinigingsmiddelen (oplosmiddel of dergelijke), maar enkel een met een milde zeepoplossing bevochtigd doekje gebruiken. Erop letten dat er geen vloeistof in het apparaat binnendringt en met een droog, zacht doekje nawrijven. Losse monsterresten/poeder kunnen voorzichtig met een penseel of handstofzuiger verwijderd worden.

**Gemorst te wegen goed onmiddellijk verwijderen.**

### **11.2 Onderhoud, instandhouding**

Het apparaat mag uitsluitend door geschoolde en door de firma gemachtigde servicetechnici geopend worden.

Vooraleer te openen, van het stroomnet verbreken.

### **11.3 Afvalverwerking**

De afvalverwerking van verpakking en apparaat dient door de exploitant in overeenstemming met het geldende nationale of regionale recht van de locatie van de gebruiker doorgevoerd te worden.

## 12 Kleine hulp bij pannes

In geval van een storing in het verloop van het programma dient de weegschaal even uitgeschakeld en van het stroomnet verbroken te worden. Met het weegprocédé moet men dan terug vanaf het begin van start gaan.

Hulp:

### Storing

### Mogelijke oorzaak

De gewichtsaanduiding is niet verlicht.

- De weegschaal is niet ingeschakeld.
- De verbinding met het stroomnet is onderbroken (netsnoer niet ingestoken/defect).
- De netspanning is uitgevallen.
- De batterijen zijn verkeerd ingelegd of leeg
- Er zijn geen batterijen ingelegd.

De gewichtsaanduiding verandert voortdurend

- Tocht/luchtbewegingen
- Trillingen van de tafel/vloer
- Die weegplaat heeft contact met vreemde voorwerpen.
- Elektromagnetische velden/statische oplading (andere plaats van opstelling kiezen/zo mogelijk, storend apparaat uitschakelen)

Het weegresultaat is blijkbaar foutief

- Het display van de weegschaal staat niet op nul
- De justering is niet meer correct.
- Er heersen aanzienlijke temperatuurschommelingen.
- Elektromagnetische velden/statische oplading (andere plaats van installatie kiezen/zo mogelijk, storend apparaat uitschakelen)

Als er zich andere foutmeldingen voordoen, weegschaal uit- en nogmaals inschakelen. Indien de foutmelding blijft bestaan, fabrikant op de hoogte brengen.