



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433- 9933-0

Fax: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instalační instrukce LED dioda

KERN CFS-A03

Verze 1.4

2018-04

CZ




CFS-A03-IA-cz-1814

Konfigurace

Signalizační lampičku **CFS-A03** možno používat rovněž pro další účely, což lze provést následujícím způsobem:

za účelem výměny přípojky nutno odšroubovat 4 šrouby a sejmut deskou podstavce.

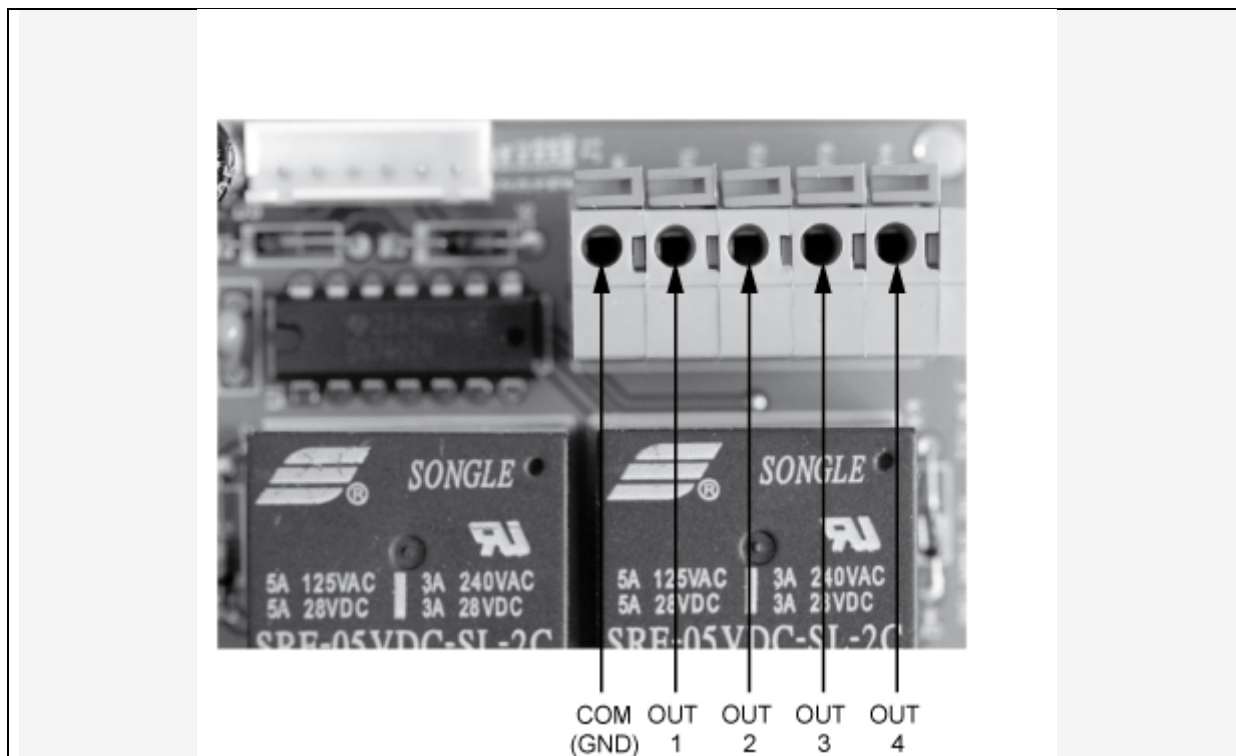

Nelze vzájemně zaměňovat kabely „COM” (GND)

Model GAB		Modely KFB-TM, KFS-TM, CFS, CPB	
COM (GND)	Cerný	COM (GND)	Cerný
OUT 1	Zlutý	OUT 1	Zlutý
OUT 2	----	OUT 2	Cervený
OUT 3	Cervený	OUT 3	Zeleň
OUT 4	Zeleň	OUT 4	----