

KERN[®]

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel: +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Instrução de montagem **Conjunto cabeceira-escabelo**

KERN MBC-A05

Versão 1.0
04/2014
P



MBC-A05-IA-p-1410



KERN MBC-A05

Versão 1.0 04/2014

Instrução de montagem Conjunto cabeceira-escabelo

Índice

1	Dados técnicos	3
2	Extensão de fornecimento	3
3	Descrição.....	3
4	Montagem.....	4
5	Limpeza/desinfecção.....	4

1 Dados técnicos

KERN	MBC-A05
Medidas [mm] no estado completamente montado	600x280x128
Peso líquido [kg]	350

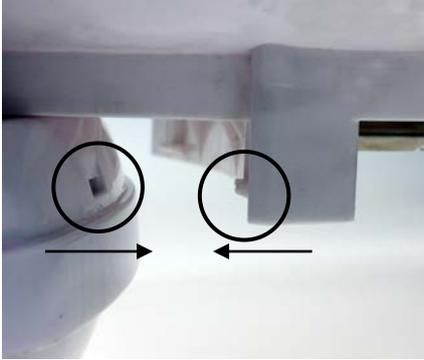
2 Extensão de fornecimento

- 1 prato de pesagem com cabeceira e escabelo
- Instrução de montagem

3 Descrição

A cabeceira e escabelo KERN MBCA05 constituem limitações laterais do prato de pesagem que aumentam a segurança do bebê.

4 Montagem

	<p>Fixar o conjunto cabeceira-escabelo na balança, de acordo com a ilustração.</p>
	<p>Conjunto cabeceira-escabelo montado.</p>

5 Limpeza/desinfecção

Limpar o prato de pesagem e caixa exclusivamente com um detergente para uso doméstico ou desinfetante comercial. Observar as indicações do fabricante. Não utilizar nenhuns produtos de limpeza agressivos ou polidores, tais como o álcool, benzina ou similares, porque podem danificar a superfície de alta qualidade.

Para evitar uma contaminação cruzada (micose, ...), limpar o prato de pesagem regularmente. Recomendação: após cada pesagem que poderia levar a uma contaminação potencial (p. ex. nas pesagens com direto contato com a pele).



Não aspergir o dispositivo com um desinfetante.

O desinfetante não deve penetrar o interior da balança.

Recomendamos fazer a desinfecção limpando a superfície a molhado.

Remover as sujeiras imediatamente.