



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
e-Mail: info@kern-sohn.com

Тел.: +49-[0]7433- 9933-0
Факс: +49-[0]7433-9933-149
Интернет: www.kern-sohn.com

Инструкция по установке Интерфейс

KERN KFN-A01

Версия 1.1
02/2013
RUS

KFN-A01-IA-rus-1311



KERN KFN-A01

Версия 1.1 02/2013

Инструкция по установке

Монтаж интерфейсного кабеля KFN-A01 в терминал KFN-TM



Удалить винты на тыльной стороне терминала




Снять крышку




Продеть интерфейсный кабель через отверстие в терминале



Привинтить кабель к терминалу

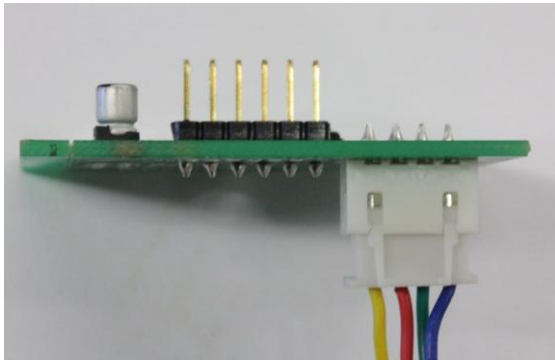



Вставить кабель в плату RS-232

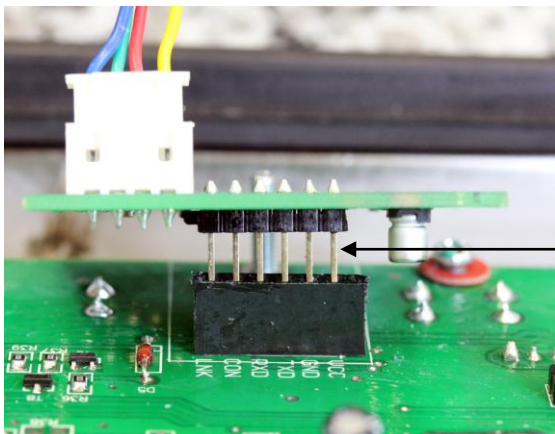


Вставить плату RS-232 в системную плату

Следить за расположением выводов!

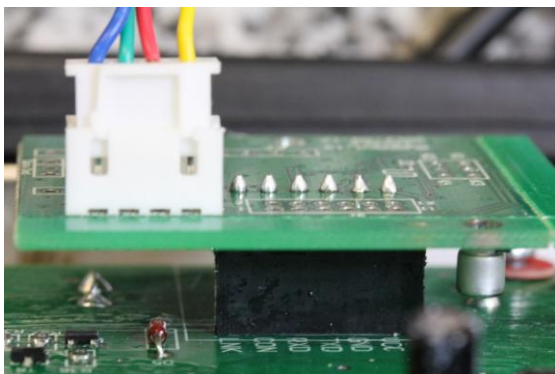

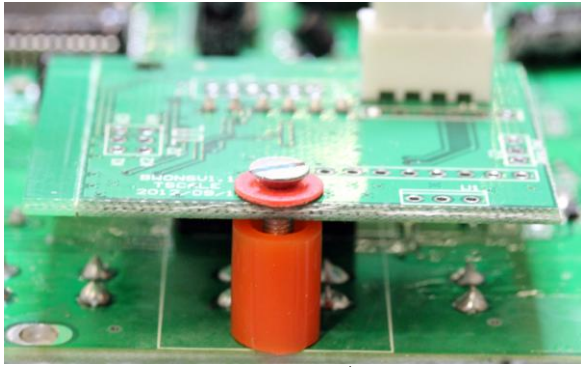

Завинтить винт с распоркой

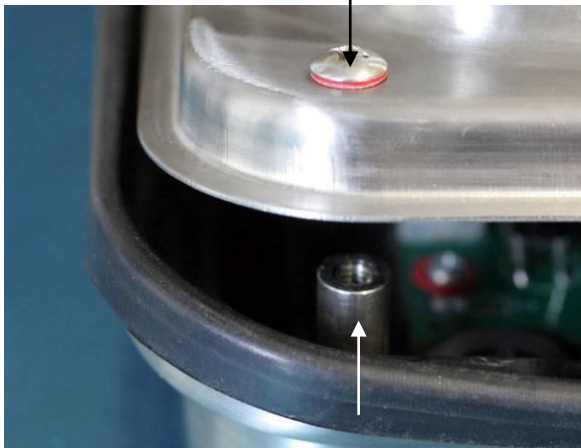

Снова завинтить винты на тыльной стороне



Кабель (1,5 м) подключить к принтеру/ПК и заблокировать