



Sauter GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
Courriel : info@kern-sohn.com

Tél. : +49-[0]7433- 9933-0
Fax : +49-[0]7433-9933-149
Internet : www.sauter.eu

Mode d'emploi Banc d'essai manuel

SAUTER TVL/TVL-XL

Version 2.0
04/2020
FR



MESURE PROFESSIONNELLE



SAUTER TVL/TVL-XL

V. 2.0 04/2020

Manuel d'utilisation du banc d'essai

Nous vous remercions d'avoir acheté le banc d'essai manuel à manivelle SAUTER. Nous espérons que la conception de haute qualité de ce système de mesure avec sa haute reproductibilité vous satisfera pleinement. Nous sommes à votre disposition pour toute question, tout souhait et toute suggestion.

Table des matières:

1	Étendue de la livraison	3
2	Avertissements	3
3	Description technique	3
3.1	Données techniques banc d'essai	3
3.2	Caractéristiques techniques de l'unité de mesure de la longueur LA (sans interface série)	
	4	
4	Maintenance	4


1 Étendue de la livraison

- SAUTER TVL
- Un crochet

2 Avertissements

Les mesures de force effectuées de manière incorrecte peuvent provoquer des blessures graves et des dommages matériels et ne doivent donc être effectuées que par un personnel formé et expérimenté.

En particulier, il faut éviter que les forces agissant à travers le banc d'essai sur le dispositif de mesure dépassent la charge maximale (Max) du banc d'essai ou du dispositif de mesure ou que des forces n'agissant pas axialement à travers le banc d'essai agissent sur le dispositif.

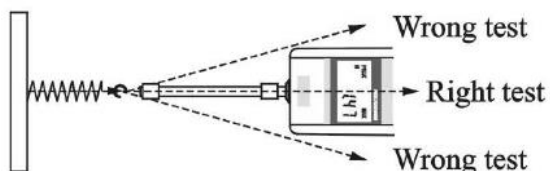

3 Description technique

3.1 Données techniques banc d'essai

	TVL	TVL-XL
Force maximale	500N	
Direction de mesure	verticale et horizontale	
Course du manivelle par tour	3mm	
Hauteur de montage du crochet supérieur par rapport à la plaque de base	Environ 470 mm	Environ 720
Crochet à filetage	M6	
Hauteur de la fusée à partir de la plaque de base	230mm	
Filetage de la plaque de montage de base	4x M3 (inclus dans la livraison)	
Espace de travail	Environ 200 mm	Environ 450 mm
Poids	8 kg	15 kg

3.2 Caractéristiques techniques de l'unité de mesure de la longueur LA (sans interface de série)

	TVL	TVL-XL
Longueur de la gamme	200mm	
Lisibilité	0,01mm	
Boutons de commande		
On/0	<ul style="list-style-type: none">• Allumer• Zéros de l'affichage LA	
mm/in	Changer les unités entre millimètre et pouce	
▲	Pas de fonction	
▼	Pas de fonction	

4 Maintenance

Pour éviter la rouille, le banc d'essai doit être nettoyé avec un chiffon doux après chaque utilisation.

Il ne faut en aucun cas utiliser des produits de nettoyage agressifs.